

■作業効率を一段と高める専用ラックなどオプション類

- 器具用6段ラック (対応モデル:MU-6200/6200D)
 棚板を全段取り外すことができ、アダプターを装着することも可能です。
- 器具用5段ラック
- 器具用4段ラック
- 器具用3段ラック
- 器具用2段ラック
- 麻酔器具用ラック
- アルカリ性洗浄剤 MU-M580S
- アルカリ性洗浄剤 MU-M570S
- 酵素配合中性洗浄剤 MU-M700S
- 潤滑防錆剤 MU-MM200S / MU-M600S(速乾性)
- 器具用5段ラック
- 器具用4段ラック
- 器具用3段ラック
- 器具用2段ラック
- 麻酔器具用ラック
- スリッパ用ラック
- クロックス用ラック*
- ラバロ鉗子用アダプタ
- 吸引嘴管用アダプタ
- チューブ用アダプタ
- 器具用バスケット(大・中・小)
- マイクロ器具用バスケット(大・小)
- リザーブタンク
- 温度記録計
- モニタリングシステム
- 専用台車
- 純水仕様*
- 薬剤ポンプ追加*
- 槽内LED照明*
- プラズマクラスター発生装置*
- おしゃべり機能*

*クロックスはCrocs,Inc.の登録商標です。 *装置本体出荷時のみ対応可能。

設置条件・場所に応じて2種類・3タイプをご用意

	導入しやすいコンパクトタイプ MU-6100	大容量ハイパワータイプ MU-6200	ダブルドアタイプ MU-6200D
外形寸法(mm)	幅800×奥行700×高さ1,900	幅935×奥行795×高さ2,025	幅935×奥行800×高さ2,025
質量	約340kg(運転時:約440kg)	約385kg(運転時:約525kg)	約420kg(運転時:約560kg)
必要設備	電源	3相 200V 10kVA以上 (30A以上のブレーカー) 定格容量:約8kVA	
	給水	15A 配管(SGP、バルブ止め)0.1~0.2MPa(1~2kgf/cm ²) 30L/分以上	
	給湯	15A 配管(SGP、バルブ止め)0.1~0.2MPa(1~2kgf/cm ²) 30L/分以上	
	純水(オプション)	15A 配管(SUS、バルブ止め)0.1~0.2MPa(1~2kgf/cm ²) 30L/分以上	
	排水	25A 配管(SGP)自然排水 背圧がないこと(排水温度は最高93℃になります)	40A 配管(SGP)自然排水 背圧がないこと(排水温度は最高93℃になります)
排気	—	排気口径150mm 風量:3~5m ³ /分の吸い込みダクトに接続	
操作・モニタ表示	液晶コントロールパネル(カラー液晶)		
洗浄終了	ブザーと終了メッセージの表示		
槽材質	ステンレス鋼 SUS304		
シャワーポンプ	出力1.5kW		
給排水	自動		
洗浄コース	20コース設定可能		
収納バスケット数	当社標準バスケット 10個(5段ラック使用時)	当社標準バスケット 12個(6段ラック使用時)	

*MU-6100ダブルドアモデル(MU-6100D)、蒸気仕様モデル(MU-6200V/VD)、蒸気・電気併用モデルは、営業担当にお問い合わせください。

クラス分類:クラスI(一般医療機器) 一般的名称:器具除染用洗浄器(JMDNコード: 35424000)
 医療機器製造販売届出番号:29B2X10011000010(MU-6100)、29B2X10011000011(MU-6100D)

選べる4色のサイドパネルカラー
 (オプション:標準色はステンレスシルバー)



(ピンク系) (ブルー系)



(グリーン系) (オレンジ系)



ダブルドア
 MU-6200D
 (ブルーカラーモデル)

●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●表示部は、ハメコミ合成で実際の表示とは色調など若干異なります。●当カタログに掲載された機種の中には、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●本カタログ掲載の製品には、警告表示ラベルのあるものもありますので、ご注意ください。

安全にお使いいただくために
 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●シャープ 医用洗浄装置 ホームページ
<https://jp.sharp/business/medical-cleaning-systems/>

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

<p>《製品に関するご相談》 シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社 東京 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 電話 050-5213-6458 (代表) 大阪 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 電話 050-5444-7802 (代表) 福岡 〒812-0881 福岡市博多区井相田2丁目12番1号 電話 (092) 3572-2911 (代表)</p>	<p>《故障/修理に関するご相談》 シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション社 ナビダイヤル 0570-061010</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。 ●IP電話・PHSからはご利用できません。電話(06)6794-2912へおかけください。
--	---	--

シャープ株式会社
 本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

このカタログの内容は2020年10月現在のものです。(2022年4月一部改訂)

J E T W A S H E R
M U - 6 0 0 0
 S E R I E S

コンパクトなのに大容量。強力な洗浄力を、もっと。



シングルドア
MU-6100
(グリーンカラーモデル)

ダブルドア
MU-6200D

●サイドパネルカラーは5色から選べます (オプション)


P O W E R F U L

もっと強く。を目指した「洗浄力」

水量1.5 倍の強力ジェットウォッシャー

強力になった新型ポンプの採用と専用ラック部の給水ジョイントの改良によりシャワーの吐水量を従来機に比べ1.5倍 ※1 に増量。強力シャワーの実現により洗浄性能をさらにアップしました。


※1 当社MU-5100/5200シリーズ比。

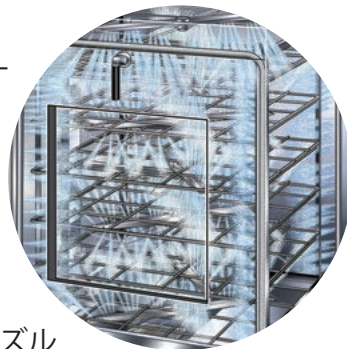

洗いムラを抑えるコーナーシャワーノズル

洗浄槽内の上部4隅にシャワーノズルを配置。死角を少なくし、ラック全体のすみずみまで洗浄するので、洗いムラを抑えることができます。

洗浄工程 (用途・目的に応じた適切な洗浄コースの設定が可能)

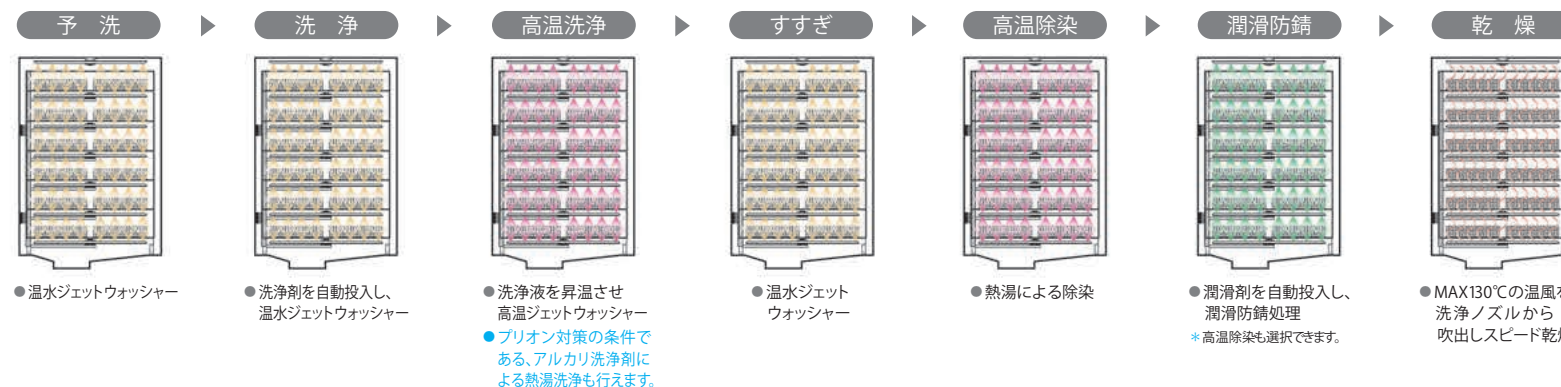

F L E X I B L E

もっと多く。を実現する「対応力」

コンパクトでも大量洗浄

設置面積を抑えたコンパクトボディでありながら、6段ラック ※2 を採用しさらなる大量洗浄や大きな器具の洗浄にも対応しました。

※2 MU-6100は5段ラック。



大きな器具や大量洗浄もおまかせ

ラックは全ての棚の取り外しができるので、大きな器具を洗浄する場合など便利に使い分けることができます。

E A S Y

もっとやさしく。が詰まった「操作性」

大きく見やすい操作パネルと押しやすい操作ボタン

大型の液晶パネルに大きな文字でシンプルにレイアウトされた操作パネル。設定もやさしくこなせます。設定後は手もとのボタンで簡単運転できます。



洗浄槽内が見やすい大型ウインドウ

内部にLED照明 (オプション) も搭載でき、洗浄状態の確認が容易です。

プラズマクラスターで室内環境配慮

洗浄室内で従事される方の

空気環境に配慮しました。(オプション)

※設置している室内に対してのもので洗浄槽に対するものではありません。



(効能・効果について、詳しくはシャープホームページ <https://jp.sharp/> をご覧ください。)
* プラズマクラスターマーク、プラズマクラスター及びPlasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

● 全工程終了しました・・・声でお知らせ
開始・終了、エラーなど、登録したコメントを音声でお知らせ。(オプション)

● ノズルの詰まりもお掃除カンタン
回転ノズルに清掃用の開閉小窓を新設。お掃除も楽々です。

手軽さが定評のジェットウォッシャー*
洗浄装置。半世紀に亘り培った技術と
工夫で強力なシャワー洗浄を実現。
洗浄対象の多様化や大容量化にも
柔軟に対応。その上、使い勝手や
作業環境にまでこだわりました。

*シャープのジェットウォッシャーは「消毒と減菌のガイドライン」(監修:厚生労働省)で推奨されているウォッシャー・デイスインフェクターと同機能の製品です。

J E T W A S H E R
MU - 6 0 0 0
S E R I E S